

คำแนะนำการถ่ายภาพแถบทดสอบ

เพื่อให้ระบบวิเคราะห์แถบทดสอบของคุณมีความแม่นยำที่สุด โปรดปฏิบัติตามคู่มือง่ายๆ เหล่านี้ เมื่อถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์ของคุณ

1. การจัดกึ่งกลาง (Centering):

ต้องวางแถบทดสอบไว้กึ่งกลางบนพื้นสีดำที่กำหนดไว้ ตามภาพ 1.1 และต้องไม่ชนขอบบนหรือขอบด้านข้าง

2. ทิศทาง (Orientation):

แผ่นทดสอบหรือ test pad ต้องหงายขึ้น และอยู่ด้านบนของภาพ


3. มาร์กเกอร์อ้างอิง (QR Code):

ต้องเห็น Marker ทั้ง 5 จุดครบถ้วนภายในกรอบภาพ

4. ความคมชัดกับภาพ (Focus):


ภาพถ่ายต้องมีความคมชัดและอยู่ในโฟกัสอย่างเหมาะสม

! เมื่อพิมพ์ไฟล์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าขนาดพิมพ์(Print size) เป็น 100% เพื่อให้ขนาดแผ่นฟอร์ม ถูกต้อง และสามารถกวัดจากตำแหน่งมาร์กเกอร์อ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

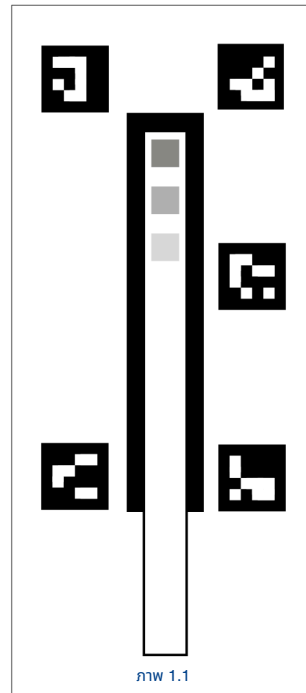

สแกนเพื่อเริ่มใช้งาน
QuantifyGo®

เปิดแอปพลิเคชันและเลือก
พารามิเตอร์ที่ต้องการวัด

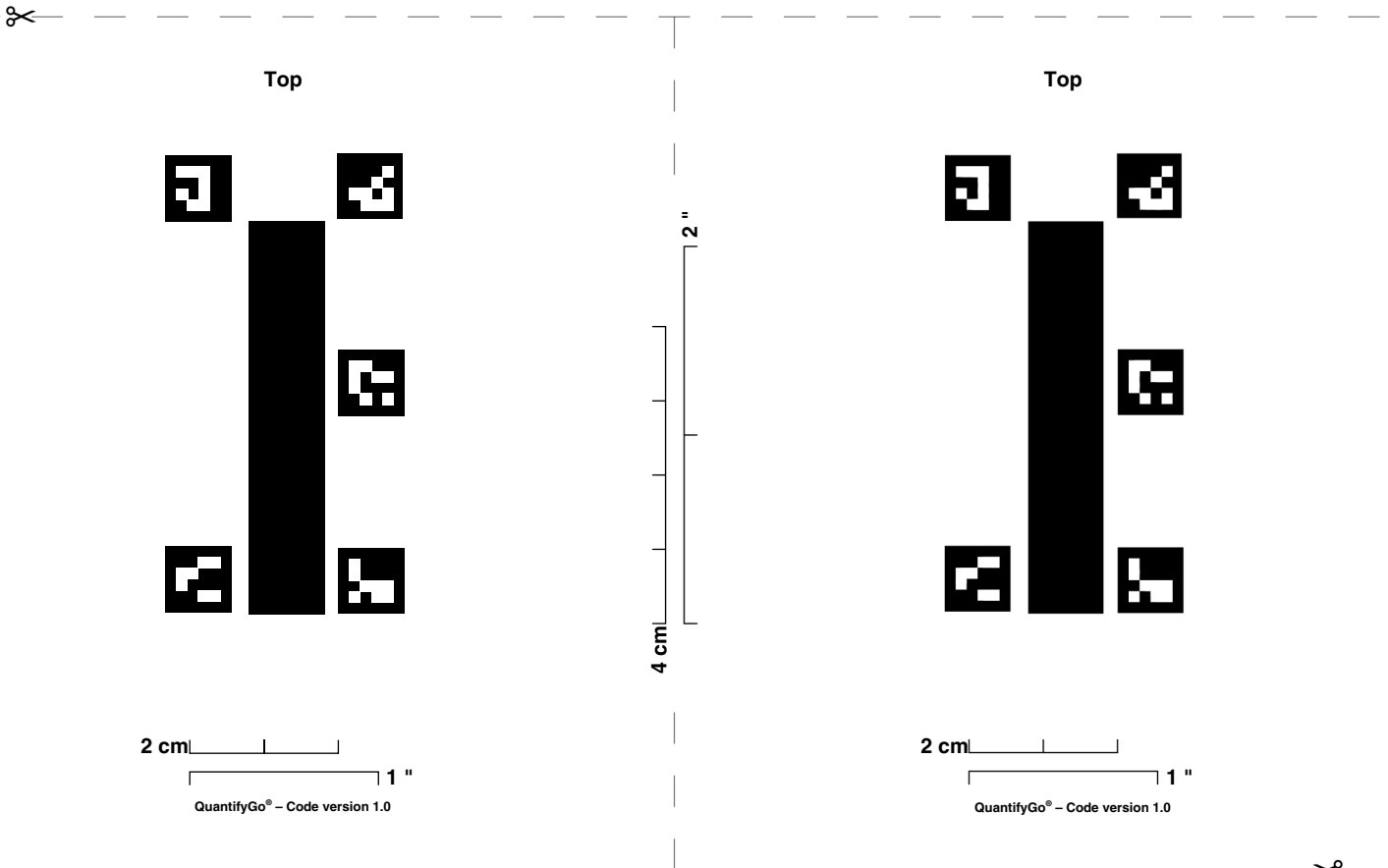

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL GmbH&Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

